

OMRON®

Monitor de Presión Arterial de Brazo Automático



 **Bluetooth®**



MEDICIONES PRECISAS




LA MARCA #1 RECOMENDADA POR MÉDICOS*



COMPATIBILIDAD CON APP

El Monitor de Presión HEM-7156T es muy fácil de usar y confiable. El brazalete Intelli Wrap provee mediciones precisas en cualquier posición en la parte superior del brazo. La guía de ajuste del brazalete indica si el brazalete está ajustado correctamente. Adicionalmente, tiene conexión Bluetooth y es compatible con la App de OMRON connect para almacenar los datos de mediciones en su Smartphone y compartir los datos con su médico o con miembros de la familia.

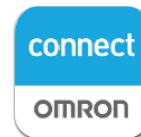

iPhone & Android™



GUÍA DE AJUSTE DEL BRAZALETE: El monitor alerta al usuario cuando el brazalete no está colocado correctamente.



DETECTOR DE ERROR DE MOVIMIENTO: El monitor avisa cuando se produce un error en la lectura debido a un movimiento excesivo del usuario.



DETECTOR DE LATIDO IRREGULAR: El monitor alerta al usuario, la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos. También avisa la cantidad de latidos irregulares (hasta 3) mientras mide la presión arterial.



El brazalete Intelli Wrap se expande y cubre toda la circunferencia del brazo, asegurando la adecuada compresión de la arteria braquial para mediciones precisas.



VALOR PROMEDIO DE LECTURAS PREVIAS: El monitor calcula y muestra el promedio de las tres mediciones más recientes.



60 MEMORIAS CON FECHA Y HORA: El monitor almacena hasta 60 mediciones.



5 AÑOS DE GARANTÍA:** Garantía limitada de cinco años que le da tranquilidad.



CONECTIVIDAD POR BLUETOOTH CON OMRON CONNECT:

La aplicación te permite almacenar los datos de tus lecturas en tu smartphone y compartirlos con su médico o con sus familiares.

* Estudio IQVIA Abril 2018, recomendación de la marca de monitor de presión arterial entre 200 médicos en México.

**Consulte el manual de instrucciones para detalles adicionales.



TECNOLOGÍA DE
OMRON HEALTHCARE
EN JAPÓN

All for Healthcare

HEM-7156T



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

| Caja | Cantidad | Peso aprox. | Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad) |
|--------------|--------------|-------------|---|
| Unidad: | 1 unidad | 758.3 g | 187 mm x 175 mm x 113 mm |
| Caja Master: | 10 unidades | 8.58 kg | 598 mm x 215 mm x 400 mm |
| Código UPC: | 073796715601 | | |

ESPECIFICACIONES

Modelo: HEM-7156T

Pantalla: Pantalla digital LCD

Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg, Pulso: 40 a 180 latidos/min.

Precisión: Presión: ±3mmHg, Pulso: ±5% de la lectura mostrada

Inflado: Automático por bomba eléctrica

Desinflado: Válvula de liberación automática de presión

Método de medición: Método oscilométrico

Clasificación IP: IP 20

Fuente de alimentación: 4 pilas "AA" de 1.5 V o un adaptador de CA opcional (ENTRADA CA100 - 240 V 50 - 60 Hz 0.12 - 0.065 A)

Vida útil de las pilas: Aproximadamente 1000 mediciones (con pilas alcalinas nuevas)

Comunicación inalámbrica: Intervalo de frecuencias: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) Modulación: GFSK Potencia radiada aparente: <20 dBm

Pieza aplicada:  = Tipo BF

Protección contra descargas eléctrica: Equipo electromédico (ME) de alimentación interna (si usa solo pilas) Equipo electromédico (ME) Clase II (Adaptador de CA opcional)

La marca y logotipo con la palabra Bluetooth® Smart son marcas comerciales registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. es bajo licencia. Otras marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

NOTA: Estas especificaciones pueden ser sujetas a cambio.

Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo

Temperatura de operación/humedad: +10 °C a +40 °C / 15 a 90 % de HR (sin condensación) / 800 a 1060 hPa

Temperatura de almacenamiento/Humedad/Presión de aire: -20 °C a +60 °C / 10 a 90 % de HR (sin condensación)

Peso de la unidad principal: Aproximadamente 340 g (sin pilas incluidas)

Peso del brazalete: Aproximadamente 163 g

Dimensiones de la unidad principal: Aproximadamente 105 mm (ancho) x 85 mm (alto) x 152 mm (largo)

Dimensiones del brazalete: Aproximadamente 145 mm x 532 mm (tubo de aire: 750 mm)

Circunferencia del brazalete: 22 a 42 cm

Memoria: Hasta 60 lecturas

Contenidos: 1 Monitor
1 Brazalete de brazo (HEM-FL31-B)
4 Pilas "AA"
1 Estuche
1 Manual de instrucciones
1 Guía de OMRON connect

Medición confiable y precisa

CLÍNICAMENTE VALIDADO*

Brazalete preciso Intelli Wrap

 Guía de ajuste del brazalete

Mediciones precisas en cualquier posición en la parte superior del brazo**

Indica si el brazalete está ajustado correctamente



Comparta con su Médico/Familia

Transfiera mediciones automáticamente a su smartphone



Para más información visite:
omronconnect.com



* Estudio clínico de brazalete Intelli Wrap con HEM-7321-E, Dr. G. Bilo et al. Italia 2015. Datos en archivo. El estudio se realizó con modelo M6 Comfort con brazalete Intelli Wrap. (M7 Intelli IT es técnicamente equivalente)
**Mancia G et al. Eur Heart J. 2013;34(28):2159-219

Hecho en Vietnam

